

JUP#TER
PHOTO REJUVENATION SYSTEM
flash Out

フォトリジュビネーションシステム ジュピター
フラッシュアウト

定格・仕様

製品名	フォトリジュビネーションシステム ジュピター® フラッシュアウト®
定格	電源規格:PSE・CCC・CE ACアダプター入力電圧:AC100V-240V 50-60Hz 1.9A
質量	重量:約304g(本体のみ:ACアダプター含まず) 外形寸法:約H75.6×W179.5×D45.3mm
消費電力	最大35W
照射回数	約400,000発
付属品	ACアダプター、サングラス、ポーチ、取扱説明書兼保証書
オートOFF	約5分
原産国	日本(ACアダプター:中国)

故障または修理は
お買い求め販売店へご相談ください

[製造販売元]

CBS cosmetics 株式会社シー・ビー・エス

[お客様ご相談センター] ☎ 0120-837-277

受付時間 10:00~17:00 土・日・祝日・弊社休業日を除く月~金曜日
※都合によりお休みをいただく場合がございます。ご了承ください。



美肌へ導く
快適なムダ毛ケア

その光、サロン級



JUP#TER
PHOTO REJUVENATION SYSTEM
flash Out

CBS cosmetics

照射回数

40万
ショット

ショット単価

約
0.1円

連続照射 オート照射

最速
0.8秒

ムダ毛ケアに
最適な出力

最大
10J

4つの通気口で
機器内の温度上昇をコントロール
(長時間のトリートメントにも対応)

3モード×照射レベル5段階

M:メイル (主に男性向き) F:ファミール (主に女性向き) J:ジュニア (主にお子様向き)

DIF方式
(ディープインパクトフラッシュ)
瞬間冷却
(サファイアクリスタル採用)

タッチセンサー
スキンセンサー



軽くて、使いやすい
コンパクト設計

304g

※アダプター重量含まず

サファイア
クリスタル
冷却

タッチ
センサー
(オート照射)

肌感知
センサー
(密着照射)

単射・連続
切り替え

ジェル
不要

VIO
男性のヒゲ

⏻ M SHOT

手動 / 自動 モード切り替え可能

手動モード(単射)

お肌の敏感な箇所や小さな部位、
狭い部位、当てにくい箇所の
お手入れに適したモード

●むぎ ●足首 ●VIO ●手足の指


自動モード(連続)

広い範囲を効果的にお手入れできるモード
照射面を常に肌に当てた状態で
ゆっくりと滑らせて

●足 ●腕 ●背中 ●お腹

ゼロ

密着 0 距離 照射 & 冷却

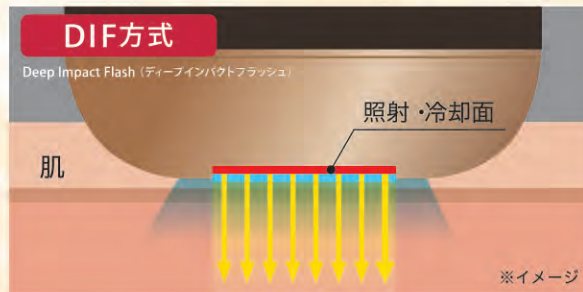


高純度・高透過のサファイアクリスタル採用

- 肌に密着させることで、光エネルギーをダイレクトに届けます。
- 照射と同時に瞬時に冷却、肌への負担を抑え、スムーズなお手入れを叶えます。



まるで氷のような体感
瞬間冷却
7°C

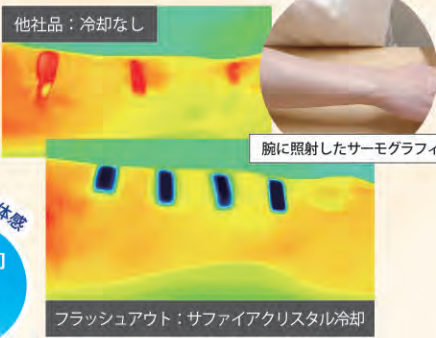

「痛くない・熱くない・傷めない」

1台で家族みんなのムダ毛一掃!

M: メイル

主に男性向き
男性の剛毛・頑固なヒゲ



F: フィメイル

主に女性向き
女性の繊細な肌向け



J: ジュニア

主にお子様向き
デリケートなお子様の肌向け



使用する部位や肌色に合わせてレベル調整ができます



フラッシュアウト® ご使用方法動画

セット内容や機器の
使用法はコチラから
ご覧いただけます。



YouTube URL
<https://youtu.be/3bAhf0hasUc>

お手入れできる部位



効果的なお手入れ頻度

(使用開始) **1~4 週間目** **5~8 週間目** **9 週間目以降**

週2回~週3回

週1回

必要に応じて

必ず肌や毛色の確認をしてください。



● 照射する部位の肌の色や異常がないことを確認してください。 ● 傷口、湿疹、ほくろ、刺青、しみ等のある部位には使用しないでください。
● 著しく肌の色が濃い人や日焼けした後の肌には使用しないでください。



※毛色が明るい色、灰色、金色または白色などの場合は、黒髪と比べてお手入れの効果が薄くなります。

<1回のお手入れで必要なショット数の目安>



顔 20~30ショット



両腕 20~60ショット



両ワキ 6~8ショット



両脚 150~200ショット



背中 40~60ショット



手足の指 20ショット



VIO 10~20ショット

1回の使用
全身：約300ショット

照射回数
40万ショット

全身のケア
約1,300回分



痛みを感じやすい

男性のヒゲ

毛深い方

にもおすすめ!!

美肌へ導く快適なムダ毛ケア

お手入れするごとにツルすべの肌へ

フラッシュアウトの光=エステの光フェイシャル

使い続けることで、肌サイクルを整え、くすみの原因となる古い角質をはがしやすくし、美しい肌へと導きます。



◇ ご使用前に



お手入れする部位の長い毛は剃刀やシェーバーで処理する

● 光は、メラニンに反応します。効率よくムダ毛ケアするために
深剃りしないでください。(0.5~2.0mm程度)

● 使用する**前日**に毛並みに沿って軽く優しく処理を行ってください。

● 毛抜きやワックス、徐毛クリーム等を使用した処理は行わないでください。

※お肌のほてりが気になる場合は、保冷剤や冷やしたタオルなどで十分に冷やしてください。



お手入れする部位の肌を清潔にする

● ファンデーションなどメイクアップ用品をつけた状態で使用しないでください。

● 使用前・使用中は、お手入れ部位に
ジェル・ローション・クリーム・オイルなどを**塗布しないでください。**

※フラッシュアウトは**ジェル不要です**

● 髪は束ねるかヘアバンドなどをして邪魔にならないようにしてください。

● 照射の際、付属のサングラスを着用し、強い光が目に入らないようご注意ください。

フラッシュアウト®はこんな方におすすめ

- シェーバーなどの自己処理で肌荒れしやすい方
- ムダ毛をケアしたいけど、体を見られるのが恥ずかしい方や人にされるのが苦手な方
- 熱さや痛みが苦手な方



- 気になるところだけ部分的にケアしたい方
- 好きな時にムダ毛ケアしたい方
- 家族やパートナーにムダ毛ケアしてほしい方